

KVISTBERGA™

PERFOLIGHT

Art.



U1, U2, U2/3, U3

Bruksanvisning
SVENSKA

User Manual
ENGLISH



PERFOLIGHT Teleskopiska modeller - U1, U2, U2/3, U3

- Kontrollera att inga skador har uppstått på ramperna under transporten. Om emballaget är skadat och detta misstänks så skall det omedelbart rapporteras till transportbolaget. Ramperna skall gå lätt att dra ut och skjuta ihop.
- Läs noga igenom bruksanvisningen och varningstexter innan du använder ramperna. Spara bruksanvisningen för framtida behov.
- På varje ramp finns en dekal som anger med vilken maximal last ramperna får belastas. **Maxlasten är angiven per styck.** Ett par ramper kan alltså belastas med dubbla vikten, detta under förutsättning att vikten är jämnt fördelad.
- **Maxlasten per ramp anges med detta tecken:** 
- Dekalen anger också vilken högsta nivåskillnad ramperna är lämpliga för. **Ta det försiktigt, och använd ramperna med gott omdöme.**
- **Rekommenderad maxhöjd** anges med detta tecken: 
- **OBS!** Rampen får bara fällas ut när den nedre änden vilar mot marken. Annars kan allvarlig skada hända på både ramp och person.
- Ställ ner rampen på marken. Frigör transport-säkringen på den teleskopiska delen. Dra sedan ut den teleskopiska delen till önskad längd. Placera ramperna med "läppen" stadigt vilande på det övre planet. Läppen är på undersidan försedd med halkskyddsmatta för att förhindra att ramperna halkar på underlaget. Iaktta dock försiktighet vid användandet så att inte någon del på rullstolen hakar fast och drar med sig ramperna. Avståndet mellan ramperna bör anpassas så att rullstolens hjul åker mitt på rampernas bredd.
- Vid transport skjut ihop rampen försiktigt till transportlängd, stäng transportsäkringen och bär rampen i handtaget.
- Skulle en skada uppstå på ramperna får de ej användas förrän skadan reparerats av fackman.

Garanti

Garantitiden är 2 år. Skador som uppkommit p.g.a. oaktsamhet som att rampen inte hanterats enligt ovan nämnda beskrivning ersätts inte.

Skötsel och rekonditionering

Ramperna skall hållas rena från smuts och snö så att greppet i åkytan bibehålls.

Ramperna kan rengöras med alla på marknaden vanliga rengöringsmedel.

Högtryckstvätt rekommenderas.

Demontering och källsortering

Allt ingående material är till 100 % återvinningsbart. Demontera alla plastdetaljer och lämna dessa för återvinning av hårda plastmaterial. Aluminiumdelarna lämnas som metallskrot

Användning

Ramper är medicintekniska produkter och är avsedda att användas vid transport/förflyttning av funktionsnedsatta personer sittandes i rullstol (manuella eller elektriska), enbart rullstolar, rullatorer etc. Ramper möjliggör förflyttning vid nivåskillnader såsom exempelvis trappor, trösklar eller bilar med eller utan hjälp från assistent. Ramperna kan användas såväl utomhus som inomhus. All annan användning är förbjuden.

VARNING!

Var försiktig när du fäller ut eller fäller ihop ramperna. Fingrar eller andra kroppsdelar kan klämmas mellan rampens delar. Se upp för alla glipor/springor för att undvika skada.




PERFOLIGHT Telescopic ramps U1, U2, U2/3, U3

- Check that no damage has occurred to the ramps during transport. The ramps should be easy to fold out and back again or extend and retract.
- Read carefully through the instructions and warnings before you use the ramps. Keep the instructions for future use.
- Each ramp has a sign that states the maximum load the ramp may be used for. **The Maximum load is for each ramp.** That is, a pair of ramps can take twice the indicated weight, assuming that the load is evenly distributed. **The maximum load per ramp is shown with this symbol:**



- The sign also states the maximum level difference the ramps are suitable for. **Take care and use the ramps with good judgement.**

- **The recommended maximum height is shown with this symbol:**

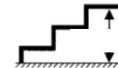

- Place the ramp with the lower end resting on the ground. Release the transport lock. Then extend the telescopic part to the desired length. Place the ramps with the flap resting firmly on the upper surface. The underside of the flaps has an anti-slip mat to prevent the ramps from slipping on the surface. Take care when in use so that no part of the wheelchair catches on the edge and pulls the ramp along with it. The distance between the ramps should be adjusted so that each of the wheelchair's wheels passes along the centre of its corresponding ramp's width.
- When transporting, retract the ramps with care and close the transport lock. Always carry the ramp by its handle.
- If the ramp is damaged in any way, it must not be used before it has been repaired. Please contact your local dealer or Kvistberga for more information and spare parts.

Warranty/Guarantee

The warranty is 2 years. Damages to the ramp due to misuse are not covered by this guarantee.

Care and reconditioning

The ramps should be kept free from dirt and snow so that the grip of the load-bearing surfaces is retained. The ramps can be cleaned with all normal types of cleaning agent. A high-pressure jet washer is recommended.

Disassembling and recycling

All included materials are 100% recyclable. Remove all plastic parts and deposit them for recycling of hard plastics. Aluminium parts should be deposited as scrap metal.

Intended usage

Ramps are medical devices intended to be used only to assist transportation of disabled persons, seated in wheelchairs or scooters. Ramps enable the passage of elevated points (f.e. Stairs, curbs, car loading edges) with or without the assistance of a helper. Ramps thereby enable patients, sitting in a wheelchair because of invalidity, to enter or leave buildings or cars, buses etc. The ramps can be used as well inside as outside. Any other use is prohibited.

WARNING!

Be careful during folding/unfolding the ramp. Fingers or other body parts of a user or/and assistant may be trapped between device's elements. Pay attention to all gaps between parts to avoid injury.

Kvistberga Group AB
Lancashirevägen 5C
SE-730 60 RAMNÄS Sweden

phone: +46-(0)21-66 100
fax +46-(0)21-66 233
email: info@kvistberga.se

KVISTBERGA™
